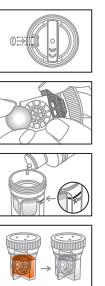


ENGLISH | Instructions for Use

Disinfecting, cleaning and neutralizing system for scleral contact lenses.

Wash your hands well with mild soap before handling your contact lenses.

1 DISINFECTING, CLEANING AND NEUTRALIZING

- Set a neutralizing and cleaning tablet at the specified position (slit) of the dedicated case body. Be sure to use the dedicated case. ▲ Setting the tablet at a position other than the specified position may lead to unsuccessful neutralisation, resulting in colouration of the lens.
- Place the lenses in the lens holder of the case.
- Fill the case with the disinfecting solution up to the marked line.
- Close the case lid and let it stand for at least four hours.
- Confirm that the lenses and the solution are clear.

2 RINSING LENSES

- Discard the solution after neutralisation, fill the case with sterile physiological saline up to the marked line, close the lid, and shake the case to rinse the lenses well. ▲ Do not use any solution (Lens Plus, etc.) containing oxidative preservative such as OcuPure®.
- Discard the solution in the case and rinse the lenses again in the same way.

3 WEARING LENSES

- Remove the lenses from the holders and wear them.

STORING LENSES

- To store the lenses, be sure to follow the instructions of eye care professionals.
- When planning to wear lenses that have been stored for 24 hours or longer, it is recommended to start care from the beginning before wearing them.

PRECAUTIONS

- Avoid serious eye infections or damage, always follow the user instructions.
- Use the disinfecting solution and the neutralizing and cleaning tablet together.
- Close the bottle tightly after use.
- Always use the cleadew SL system components including the lens case.
- Discard any remaining solution 90 days after opening the bottle.
- Do not use for soft contact lenses.
- Do not touch the tip of the bottle to avoid contamination.
- Do not swallow the solution or tablet. If you do so, drink a large amount of drinking water immediately.
- Not to be used in the eye. If you do so, immediately rinse the eye with sterile saline solution or eye washes.
- Do not use the tablet if it is damaged or discoloured.
- Always use fresh solution. (Do not reuse solution.)
- Do not use the product after the expiry date.
- Do not use the product if the bottle or package is soiled or damaged.
- Do not use the solution if it is cloudy or its colour is other colour than orange due to discolouration.
- Do not wear lenses without rinsing them with sterile saline solution after disinfecting, cleaning and neutralizing.
- Do not use the product together with another solution, tablet, or pharmaceutical drug.
- Do not use tap water to rinse the lenses or lens case.
- Keep out of reach of children.
- To prevent bacterial contamination, do not transfer the disinfecting solution to another container, nor replenish it with water or other liquid medical agent.
- To prevent contamination, use the new lens case in every purchase.
- Use the tablets immediately after opening the package.
- After using up all of the neutralizing and cleaning tablets, discard any remaining solution in the bottle.
- If the solution adheres to your clothes, wash with water immediately.
- Rins off any remaining solution on the wash stand with water after each use to prevent staining on the surface of the wash stand.
- Store products in a dry place at room temperature, avoiding direct sunlight.
- If you experience such symptoms as eye pain and irritation, remove your lenses immediately and consult your eye doctor or an eye care practitioner.
- Do not use the product if you are allergic to any of the ingredients used in it.
- Do not change the contact lens care system without consulting your eye care professional.
- In the unlikely event that the lens is coloured after care, do not wear the coloured lens.

INGREDIENTS

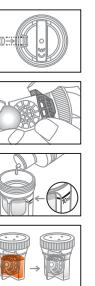
- (Disinfecting solution): [Neutralizing and cleaning tablet]: [Comprimé neutralisant et nettoyant]
Povidone-Iodine (0.05%): Sodium sulfite (2.4 mg/tablet) Proteolytic enzyme (8.0 mg/tablet)

STERILE A

FRANÇAIS | Mode d'emploi

Système de désinfection, de nettoyage et de neutralisation des lentilles sclérales.

Bien se laver les mains avec un savon doux avant de manipuler les lentilles.

DÉSINFECTER, NETTOYER ET NEUTRALISER

- Placer un comprimé neutralisant et nettoyant dans la position spécifiée (fente) du corps du boîtier dédié. S'assurer de bien utiliser le boîtier dédié à cet effet. ▲ Le fait de placer la tablette dans une position autre que celle spécifiée risque d'entraîner une neutralisation infructueuse, ce qui entraînerait une coloration de la lentille de contact.
- Placer les lentilles de contact dans le porte-lentille du boîtier.
- Remplir avec la solution désinfectante jusqu'à la ligne indiquée.
- Fermer le couvercle du boîtier et laisser reposer pendant au moins quatre heures.
- S'assurer que les lentilles et la solution sont incolores.

2 RINCER LES LENTILLES DE CONTACT

- Jeter la solution après la neutralisation, remplir le boîtier de solution saline physiologique stérile jusqu'à la ligne, fermer le couvercle et secouer le boîtier pour bien rincer les lentilles de contact. ▲ Ne pas utiliser aucune solution (Lens Plus, etc.) contenant un conservateur oxydant tel que OcuPure®.
- Jeter la solution résiduelle contenue dans l'étui et rincer une nouvelle fois les lentilles, de la même façon.

3 PORTER LES LENTILLES DE CONTACT

- Retirer les lentilles de leur support et les porter.

CONSERVER LES LENTILLES DE CONTACT

- Pour ranger les lentilles de contact, suivre les instructions données par les professionnels des soins oculaires.
- Si vous prévoyez de porter des lentilles de contact qui ont été rangées pendant au moins 24 heures, il est recommandé de démarrer l'entretien à partir du début avant de les porter.

4 PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Afin d'éviter toute infection ou lésion oculaire grave, il est important de suivre les consignes d'utilisation.
- Toujours utiliser la solution désinfectante et le comprimé neutralisant et nettoyant ensemble.
- Bien refermer le flacon après utilisation.
- Toujours utiliser les produits cleadew SL system, y compris l'étui à lentilles.
- Jeter la solution au bout de 90 jours après l'ouverture de la bouteille.
- Ne pas utiliser pour les lentilles souples.
- Ne pas loucher l'emballage de la bouteille afin d'éviter toute contamination.
- Ne pas avaler la solution ou le comprimé. Le cas échéant, boire de l'eau potable abondamment et immédiatement.
- Ne pas utiliser dans les yeux. Si le produit entre en contact avec les yeux, les rincer à l'eau immédiatement avec une solution saline stérile ou un liquide de rinçage oculaire.
- Ne pas utiliser de comprimé endommagé ou décoloré.
- Toujours utiliser une nouvelle solution. (Ne pas réutiliser la même solution.)
- Ne pas utiliser le produit après la date de péremption.
- Ne pas utiliser le produit si le flacon ou l'emballage est sale ou abîmé.
- Ne pas utiliser une solution trouble ou décolorée et d'autre couleur que orange.
- Ne pas porter des lentilles qui n'ont pas préalablement été désinfectées, nettoyées et neutralisées puis rincées avec une solution saline stérile.
- Ne pas utiliser ce produit avec une autre solution, ou un autre comprimé ou médicament.
- Ne pas utiliser l'eau du robinet pour rincer les lentilles ou l'étui à lentilles.
- Conserver hors de la portée des enfants.
- Pour éviter toute contamination bactérienne, ne jamais transférer la solution désinfectante dans un autre récipient, ne jamais la compléter avec de l'eau ou un autre agent médical liquide.
- Afin d'éviter toute contamination, utiliser le nouvel étui à lentilles à chaque achat.
- Utiliser les comprimés directement après ouverture.
- Une fois la totalité des comprimés neutralisants et nettoyants utilisés, jeter toute solution restante contenue dans le flacon.
- Si la solution entre en contact avec des vêtements, laver à l'eau immédiatement.
- Après chaque utilisation, rincer à l'eau toute solution restante présente sur un lavabo afin d'éviter qu'il ne soit taillé.
- Conserver les produits dans un endroit sec, à température ambiante et à l'abri de la lumière du soleil.
- En cas de symptômes comme des douleurs ou irritations des yeux, retirer les lentilles immédiatement et consulter un ophtalmologue ou un spécialiste des soins oculaires.
- Ne pas utiliser le produit en cas d'allergie à l'un des ingrédients utilisés dans sa composition.
- Ne pas changer de système de nettoyage des lentilles de contact sans consulter un professionnel de la vue.
- Within the case peu probable où les lentilles de contact seraient colorées après l'entretien, ne jamais les porter.

INGRÉDIENTS

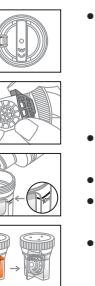
- (Solution désinfectante): [Comprimé neutralisant et nettoyant]
Povidone-Iodine (0.05%): Sodium sulfite (2.4 mg/tablette) Enzyme protéolytique (8.0 mg/tablette)

STERILE A

DEUTSCH | Gebrauchsanweisung

Desinfektions-, Reinigungs- und Neutralisationssystem für Sklerallinsen.

Vor dem Kontakt mit den Kontaktlinsen reinigen Sie Ihre Hände gründlich mit einer milden Handwaschseife.

1 DESINFIEKTION, REINIGUNG UND NEUTRALISATION

- Eine Reinigungs- und Neutralisationsstablette an der angegebenen Stelle (cavidät) der Struktur des Etuis anbringen. Benutzen Sie nur den zugehörigen Behälter. ▲ Wenn Sie die Tablette nicht in den vorgesehenen Schlitz geben, kann die Neutralisationsforschlagschale, was zu einer Verfärbung der Linse führen kann.
- Legen Sie die Linsen in das dafür vorgesehene Körbchen im Linsenbehälter.
- Füllen Sie ihn bis zur Markierung mit Desinfektionslösung auf.
- Schließen Sie den Behälterdeckel und lassen Sie diesen mindestens vier Stunden stehen.
- Nach der Neutralisationszeit achten Sie bitte darauf, dass sowohl die Flüssigkeit als auch die Kontaktlinsen transparent sind.

2 KONTAKTLINSEN ABSPÜLEN

- Den Inhalt des Kontaktlinsenbehälters leer, füllen Sie den Behälter mit steriler physiologischer Kochsalzlösung bis zur Markierung, schließen Sie den Deckel und schütteln Sie den Behälter, um die Linsen gründlich zu spülen. ▲ Verwenden Sie keine Lösung (z. B. Lens Plus, etc.) die oxidative Konservierungsstoffe wie OcuPure® enthält.
- Jeter die Lösung wieder in den Behälter und spülen die Kontaktlinsen erneut auf die gleiche Weise ab.

3 KONTAKTLINSEN TRAGEN

- Entnehmen Sie die Kontaktlinsen aus der Linsenhalterung und setzen diese zum Tragen ein.

KONTAKTLINSEN AUFBEWAHREN

- Beachten Sie bei der Aufbewahrung der Linsen die Anweisungen von Augenoptikern oder Augenärzten.
- Wenn Sie vorhaben, Linsen zu tragen, die 24 Stunden oder länger gelagert worden sind, ist es empfehlenswert, die Reinigung vor dem Tragen von vorn zu beginnen.

SICHERHEITSHINWEISE

- Halten Sie sich immer an die Gebrauchsanweisungen, um schwere Augeninfektionen oder Schäden zu vermeiden.
- Benutzen Sie bitte immer nur die desinfizierende Lösung zusammen mit der neutralisierenden und reinigenden Tablette.
- Flasche nach Gebrauch fest verschließen.
- Benutzen Sie immer die Komponenten des cleadew SL systems einschließlich des Kontaktlinsenbehälters.
- Schützen Sie die Reste der Lösung 90 Tage nach dem Öffnen der Flasche weg.
- Nicht für welche Kontaktlinse geeignet.
- Berühren Sie bitte nicht die Spitze der Flasche, um Verunreinigungen zu vermeiden.
- Verschlucken Sie nicht die Lösung oder die Tablette. Im Falle des Verschlucksens ist eine große Menge Trinkwasser zu sich nehmen.
- Direkter Kontakt mit der Augen umgehen mit einer sterilen Kochsalzlösung oder AugenkonservierungsmitTEL gründlich spülen.
- Verwenden Sie die Tablette nicht, wenn Sie beschädigt oder verfärbt ist.
- Gebräuchen Sie immer unbenutzte Lösung (keine nochmäßige Verwendung).
- Benutzen Sie das Produkt nicht nach Ablauf des Haltbarkeitsdatums.
- Benutzen Sie das Produkt nicht, wenn die Flasche oder Verpackung verschmutzt oder beschädigt ist.
- Benutzen Sie die Lösung nicht, wenn Sie trüb oder die Farbe aufgrund von Verfärbung nicht orange ist.
- Bitte tragen Sie nur Kontaktlinsen, die nach der Desinfektion und Neutralisation mit einer sterilen Kochsalzlösung abgespült wurden. Kochsalzlösung abgespült werden.
- Benutzen Sie das Produkt nicht zusammen mit anderen Lösungen, Tabletten oder pharmazeutischen Produkten.
- Kontaktlinsen oder Kontaktlinsenbehälter nicht mit Leitungswasser spülen.
- Bewahren Sie das Produkt ausserhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Um eine bakterielle Kontamination auszuschließen, verwenden Sie die Desinfektionslösung nicht in einem anderen Behälter und füllen Sie ihn nicht mit Wasser oder einer anderen medizinischen Flüssigkeit auf.
- Um Verunreinigungen zu vermeiden, benutzen Sie bei jedem Kauf einer Flasche einen neuen Kontaktlinsenbehälter.
- Tabletten nach Öffnen der Verpackung unverzüglich verwenden.
- Nachdem die gesamte Menge der Neutralisations- und Reinigungstabletten aufgebraucht sind, entsorgen Sie die restliche Lösung aus der angebrochenen Flasche.
- Sollte die Lösung auf Ihre Kleidung gelangen, waschen Sie diese sofort mit Wasser ab.
- Nach Kontakt mit dem Pflegemittel reinigen Sie bitte Ihr Waschbecken, um hartnäckige Flecken auf der Oberfläche zu verhindern.
- Bewahren Sie die Produkte in einem trockenen Platz bei Raumtemperatur auf und vermeiden Sie direkte Sonnenbestrahlung.
- Si tiene síntomas como dolor o irritación oculares, quite las lentes inmediatamente y consulte con su oftalmólogo o un profesional de la visión.
- No utilice el producto si es alérgico a cualquiera de sus ingredientes.
- No combine el sistema para el cuidado de sus lentes de contacto sin antes consultar con su profesional de la visión.
- En el improbable caso de que la lente se coloree después del cuidado, no use las lentes coloradas.

INHALTSSTOFFE

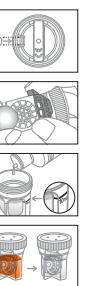
- (Desinfektionslösung): [Neutralisations- und Reinigungstablette]
Povidone-Iodine (0.05%): Sulfato de sodio (2.4 mg/tablette) Enzima proteolítico (8.0 mg/tablette)

STERILE A

ESPAÑOL | Instrucciones de uso

Sistema de desinfección, limpieza y neutralización de lentes de contacto esclerales.

Lávese bien las manos con jabón neutro antes de manipular las lentes de contacto.

1 COMO DESINFECTAR, LIMPIAR Y NEUTRALIZAR

- Coloque una tableta limpia y neutralizante en la posición especificada (cavidad) de la estructura del estuche. Asegúrese de utilizar el estuche específico de este producto. ▲ Colocar la tableta en una posición diferente a la posición especificada puede conducir a una incorrecta neutralización, lo que resultará en la coloración de la lente.
- Coloque las lentes en el soporte de lentes del estuche.
- Rellene el estuche con la solución desinfectante hasta la línea marcada.
- Cierre la tapa del estuche y déjelo reposar durante al menos cuatro horas.
- Asegúrese de que la solución y las lentes estén transparentes.

2 ENJUGAR LENTES

- Deshice la solución después de la neutralización, riempie la custodia con solución salina fisiológica estéril fino alla linea segnata, chiude il tappo e agite el estuche para enjuagar bien las lentes. ▲ No utilizar ninguna solución (Lens Plus, etc.) que contenga conservantes oxidativos como OcuPure®.
- Vacielo de la solución y enjuague los lentes de nuevo, de la misma manera.

3 USAR LENTES

- Retire sus lentes del portalentes y aplíquelas.

GUARDAR LENTES

- Para guardar las lentes, asegúrese de seguir las instrucciones de los profesionales de la visión.
- Cuando planee usar lentes que han sido almacenadas durante 24 horas o más, se recomienda comenzar el cuidado desde el principio antes de usarlas.

4 PRECAUCIONES

- Para evitar infecciones o daño graves en los ojos, siga siempre las instrucciones del usuario.
- Utilizar juntos la solución desinfectante y los comprimidos neutralizantes y limpiadores.
- Cierre el botón firmemente después de cada uso.
- Utilice siempre los componentes del sistema cleadew SL junto con el estuche para lentes.
- ▲ Deseche la cantidad de solución que quede 90 días después de abrir el botón.
- No utilice para lentes de contacto blandos.
- No toque la punta del botón para evitar la contaminación.
- No se trague la solución o el comprimido.
- Utilice siempre la solución recién preparada con el comprimido. (No reutilice la solución.)
- No utilice el producto después de su fecha de caducidad.
- Berühren Sie bitte nicht die Spitze der Flasche, um Verunreinigungen zu vermeiden.
- Verschlucken Sie nicht die Lösung oder die Tablette. Im Falle des Verschlucksens ist eine große Menge Trinkwasser zu sich nehmen.
- Direkter Kontakt mit der Augen umgehen mit einer sterilen Kochsalzlösung oder AugenkonservierungsmitTEL gründlich spülen.
- Verwenden Sie die Tablette nicht, wenn Sie beschädigt oder verfärbt ist.
- Gebräuchen Sie immer unbenutzte Lösung (keine nochmäßige Verwendung).
- Benutzen Sie das Produkt nicht nach Ablauf des Haltbarkeitsdatums.
- Benutzen Sie das Produkt nicht, wenn die Flasche oder Verpackung verschmutzt oder beschädigt ist.
- Benutzen Sie die Lösung nicht, wenn Sie trüb oder die Farbe aufgrund von Verfärbung nicht orange ist.
- Bitte tragen Sie nur Kontaktlinsen, die nach der Desinfektion und Neutralisation mit einer sterilen Kochsalzlösung abgespült wurden. Kochsalzlösung abgespült werden.
- Benutzen Sie das Produkt nicht zusammen mit anderen Lösungen, Tabletten oder pharmazeutischen Produkten.
- Kontaktlinsen oder Kontaktlinsenbehälter nicht mit Leitungswasser spülen.
- Bewahren Sie das Produkt ausserhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Um eine bakterielle Kontamination auszuschließen, verwenden Sie die Desinfektionslösung nicht in einem anderen Behälter und füllen Sie ihn nicht mit Wasser oder einer anderen medizinischen Flüssigkeit auf.
- Después de agotar todos los comprimidos neutralizantes y limpiadores, deseche la cantidad de solución que quede en el botón.
- Si la solución se adhiere a la ropa, lave la ropa inmediatamente con agua.
- Enjuague con agua la cantidad de solución que quede en el lavabo después de cada uso para evitar manchas en la superficie del lavabo.
- Conservar los productos en un lugar seco, a temperatura ambiente y lejos de la luz solar.
- Si tiene síntomas como dolor o irritación oculares, quite las lentes inmediatamente y consulte con su oftalmólogo o un profesional de la visión.
- No utilice el producto si es alérgico a cualquiera de sus ingredientes.
- No combine el sistema para el cuidado de sus lentes de contacto sin antes consultar con su profesional de la visión.
- Nell'eventualità che la lente risulti colorata dopo il trattamento, evitare di indossarla.

INGREDIENTI

- (Solución

