

Ophtecs

ENGLISH | Instructions for Use


PLEASE READ CAREFULLY AND KEEP THIS INFORMATION FOR FUTURE USE

Disinfecting, cleaning and storing system for rigid gas permeable contact lenses.

FOR ALL RIGID GAS PERMEABLE CONTACT LENSES


Wash your hands well with mild soap before handling your contact lenses.

CLEANING

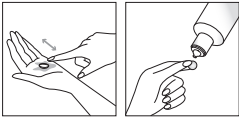

Remove each lens from your eye and place it on your palm. Place a few drops of **cleadow GP hydra one** on each lens surface and rub 20-30 times with your finger. Rinse each lens thoroughly for 5 seconds with fresh **cleadow GP hydra one**.

DISINFECTING

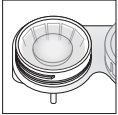

Fill the lens case with **cleadow GP hydra one** and place the lenses into the lens case. Close the lens case tightly. Soak lenses for at least 4 hours (or overnight) until ready to wear.

RINSING AND WEARING CORNEAL LENSES

Rinse corneal GP lenses for 5 seconds with **cleadow GP hydra one** before wearing

RINSING AND WEARING SPECIALTY LENSES (SCLERAL LENSES OR ORTHOKERATOLOGY LENSES)

For specialty lens users (scleral lenses or orthokeratology/Ortho K lenses), it is required to rinse your lenses thoroughly for approximately 5 seconds using sterile saline or an appropriate lens filling solution before placing them on your eye. Do not use **cleadow GP hydra one** as an insertion or rinsing solution for scleral or Ortho K lenses. Always use sterile saline or another insertion solution specifically recommended by your eye care practitioner when inserting your lenses.

WASHING LENS CASE

After the lens care, rinse the lens case with **cleadow GP hydra one** and allow to air dry.

STORAGE

Lenses may be stored in the unopened lens case for a maximum of 30 days. If the lenses are stored for longer, replace with fresh **cleadow GP hydra one** every 30 days and before wearing your lenses.

WARNINGS

Do not use **cleadow GP hydra one** if allergic to any of the ingredients used in **cleadow GP hydra one**. If you experience persistent eye discomfort, excessive tearing, vision changes, or redness of the eye, remove your lenses immediately and consult your eye doctor or an eye care practitioner. Do not use **cleadow GP hydra one** with any eye medication or other contact lens care products. Do not use **cleadow GP hydra one** as an insertion or rinsing solution for **specialty lenses (scleral or orthokeratology lenses)**.

PRECAUTIONS

Read this instruction sheet carefully before using **cleadow GP hydra one** and keep it for future reference. To avoid eye infections, always follow the user instructions. Take special care to follow these instructions when using **cleadow GP hydra one** with **SPECIALTY LENSES (SCLERAL OR ORTHOKERATOLOGY LENSES)**. Do not reuse the solution; after each use, discard any **cleadow GP hydra one** solution remaining in the lens case. Children should not use **cleadow GP hydra one** by themselves; parents are requested to be responsible for their daily care. Discard any remaining solution 3 months after opening the bottle. Close bottle tightly after use. Do not use for soft contact lenses. Do not swallow the solution. Do not touch the tip of **cleadow GP hydra one** to avoid contamination. Do not use **cleadow GP hydra one** for heat disinfection. Do not use **cleadow GP hydra one** after the expiry date. Do not use the solution if it is discoloured. Do not use **cleadow GP hydra one** if the tamper seal is damaged or missing. Do not use tap water to store and rinse the lenses. Keep out of reach of children. Store products at room temperature, avoiding direct sunlight. To prevent bacterial contamination, do not transfer the solution to another container, nor replenish it with water or other liquid medical agent. Do not use **cleadow GP hydra one** with an old lens case. Always use the new lens case provided. Do not change the contact lens care system without consulting eye care practitioner. Boric acid is toxic to reproduction and can reduce future fertility if taken by children or harm babies if taken by pregnant or lactating women. Although this product also contains boric acid, the amount of boric acid in this product is at a concentration that does not pose a health hazard. This product is safe for use by children and pregnant or lactating women as long as the product's directions are followed. Sensitivity to chemicals differs from person to person. For sensitive individuals, the recommendation is to rinse the lens with sterile saline solution before wearing.

INGREDIENTS

cleadow GP hydra one
Polyhexamethylene biguanide hydrochloride (0.0005%)
STERILE A
Hydrogen peroxide as preservative (0.004%)
Boric acid

FRANÇAIS | Mode d'emploi


À LIRE ATTENTIVEMENT ET À CONSERVER POUR CONSULTATION ULTÉRIEURE

Système de désinfection, de nettoyage et de conservation pour lentilles de contact rigides perméables au gaz.

POUR TOUTS LES TYPES DE LENTILLES DE CONTACT RIGIDES PERMÉABLES AU GAZ


Bien se laver les mains avec un savon doux avant de manipuler les lentilles.

NETTOYAGE

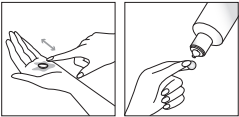

Retirez chaque lentille de l'œil et placez-la sur la paume de votre main. Déposez quelques gouttes de **cleadow GP hydra one** sur la surface de chaque lentille et frottez 20 à 30 fois avec votre doigt. Rincez soigneusement chaque lentille pendant 5 secondes avec une solution neuve **cleadow GP hydra one**.

DÉSINFECTION

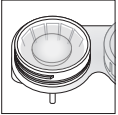

Remplissez l'étui à lentilles avec du **cleadow GP hydra one** et placez les lentilles dans l'étui. Fermez bien l'étui. Immergez les lentilles dans la solution pendant au moins 4 heures (ou pendant la nuit) jusqu'au moment de les porter.

RINÇAGE ET POSE DES LENTILLES CORNÉENNES

Rincer les lentilles cornéennes perméables au gaz (GP) pendant 5 secondes avec **cleadow GP hydra one** avant la pose.

RINÇAGE ET PORT DE LENTILLES SPÉCIALISÉES (LENTILLES SCLÉRALES OU LENTILLES D'ORTHOÉRATOLOGIE)

Pour les utilisateurs de lentilles spécialisées (lentilles sclérales ou d'orthokératologie), il est nécessaire de rincer soigneusement vos lentilles pendant environ 5 secondes à l'aide d'une solution saline stérile ou d'une solution de remplissage appropriée avant leur pose. N'utilisez pas **cleadow GP hydra one** comme solution de pose ou de rinçage pour les lentilles sclérales ou d'orthokératologie. Utilisez toujours une solution saline stérile ou une autre solution de pose spécifiquement recommandée par votre professionnel de santé oculaire lors de la pose de vos lentilles.

NETTOYER L'ÉTUI À LENTILLES

Une fois les lentilles nettoyées, rincez leur étui avec du **cleadow GP hydra one** et laissez-le sécher à l'air.

CONSERVATION

Les lentilles peuvent être conservées dans l'étui non ouvert pendant une durée maximum de 30 jours. Si les lentilles sont conservées plus longtemps, remplacez avec une solution neuve de **cleadow GP hydra one** tous les 30 jours et avant de porter les lentilles.

AVERTISSEMENTS

Ne pas utiliser **cleadow GP hydra one** en cas d'allergie à l'un des ingrédients utilisés dans **cleadow GP hydra one**. En cas de sensation d'inconfort permanent au niveau des yeux, de changements dans la vision, ou de rougeurs aux yeux, retirez les lentilles immédiatement et consultez son ophtalmologiste ou un spécialiste de soins oculaires. Ne pas utiliser **cleadow GP hydra one** avec un médicament ou autre produit de soins oculaires. Ne pas utiliser **cleadow GP hydra one** comme solution de pose ou de rinçage pour les **lentilles spécialisées (lentilles sclérales ou d'orthokératologie)**.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Lire attentivement cette notice avant d'utiliser **cleadow GP hydra one** et s'y référer si besoin par la suite. Afin d'éviter toute infection ou lésion oculaire, il est important de suivre les consignes d'utilisation. Veiller à respecter scrupuleusement ces instructions lors de l'utilisation de **cleadow GP hydra one** avec des **LENTILLES SPÉCIALISÉES (LENTILLES SCLÉRALES OU D'ORTHOÉRATOLOGIE)**. Ne réutilisez pas la solution ; après chaque utilisation, jetez toute solution **cleadow GP hydra one** restante dans l'étui à lentilles. Les enfants ne doivent pas utiliser **cleadow GP hydra one** seuls; les parents sont tenus d'être responsables des soins quotidiens. Jeter la solution au bout de 3 mois après l'ouverture de la bouteille. Bien refermer le flacon après ouverture. Ne pas utiliser pour les lentilles souples. Ne pas avaler la solution. Ne pas toucher l'embout de **cleadow GP hydra one** afin d'éviter la contamination. Ne pas utiliser **cleadow GP hydra one** pour une désinfection à la chaleur. Ne pas utiliser **cleadow GP hydra one** après la date de péremption. Ne pas utiliser une solution si elle est décolorée. Ne pas utiliser **cleadow GP hydra one** si le sceau d'inviolabilité est déchiré ou manquant.

INGRÉDIENTS

cleadow GP hydra one
Chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide (0,0005 %)
STERILE A
Péroxyde d'hydrogène comme conservateur (0,004 %)
Acide borique

DEUTSCH | Gebrauchsanweisung


BITTE SORGFÄLTIG LESEN UND DIESE INFORMATIONEN FÜR SPÄTERE NACHSCHLAGEZWECKE AUFBEWAHREN

Desinfektions-, Reinigungs- und Aufbewahrungssystem für formstabile gasdurchlässige Kontaktlinsen.

FÜR ALLE FORMSTABILEN GASDURCHLÄSSIGEN KONTAKTLINSEN


Vor dem Kontakt mit den Kontaktlinsen reinigen Sie Ihre Hände gründlich mit einer milden Handwaschseife.

REINIGUNG

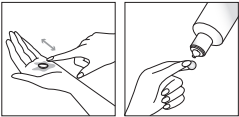

Nehmen Sie die Kontaktlinsen aus Ihren Augen und legen Sie sie auf Ihre Handfläche. Geben Sie ein paar Tropfen **cleadow GP hydra one** auf die Oberfläche der Kontaktlinsen und reiben Sie 20–30-mal mit Ihrem Finger. Spülen Sie die Kontaktlinsen sorgfältig 5 Sekunden lang mit frischem **cleadow GP hydra one** ab.

DESINFEKTION

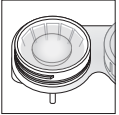

Füllen Sie den Kontaktlinsenbehälter mit frischem **cleadow GP hydra one** und legen Sie die Kontaktlinsen in den Kontaktlinsenbehälter. Verschließen Sie den Kontaktlinsenbehälter fest. Weichen Sie die Kontaktlinsen mindestens 4 Stunden lang (oder über Nacht) ein, bis sie getragen werden können.

SPÜLEN UND TRAGEN VON HORNHAUTLINSEN

Spülen Sie die Hornhaut-GP-Linsen vor jedem Tragen 5 Sekunden lang mit **cleadow GP hydra one**.

ABSPÜLEN UND TRAGEN VON SPEZIALLINSEN (SKLERALLINSEN ODER ORTHOKERATOLOGIE-LINSEN)

Benutzer von Speziallinsen (Sklerallinsen oder Orthokeratologie-/Ortho-K-Linsen) müssen die Linsen vor dem Aufsetzen auf das Auge ca. 5 Sekunden lang gründlich mit steriler Kochsalzlösung oder einer geeigneten Linseneinfülllösung abspülen. Verwenden Sie **cleadow GP hydra one** nicht als Einsetz- oder Abspüllösung für Skleral- oder Ortho-K-Linsen. Verwenden Sie beim Einsetzen Ihrer Linsen immer sterile Kochsalzlösung oder eine andere Einsetzlösung, die speziell von Ihrem Kontaktlinsenspezialisten empfohlen wurde.

REINIGEN DES KONTAKTLINSENBEHÄLTERS

Spülen Sie nach der Kontaktlinsenpflege den Kontaktlinsenbehälter mit **cleadow GP hydra one** aus und lassen Sie ihn an der Luft trocknen.

AUFBEWAHRUNG

Die Kontaktlinsen können im ungeöffneten Kontaktlinsenbehälter maximal 30 Tage lang aufbewahrt werden. Wenn Sie die Kontaktlinsen länger aufbewahren möchten, tauschen Sie das **cleadow GP hydra one** alle 30 Tage und vor dem Tragen Ihrer Kontaktlinsen aus.

WARNUNGEN

Benutzen Sie **cleadow GP hydra one** nicht, wenn Sie gegen einen der Inhaltsstoffe allergisch sind. Sollten Augenbeschwerden, tränende Augen, Veränderungen der Sicht oder eine Rötung der Augen auftreten, nehmen Sie sofort Ihre Kontaktlinsen heraus und gehen Sie zu Ihrem Augenarzt. Benutzen Sie bitte **cleadow GP hydra one** nicht zusammen mit Augenmedikamenten oder anderen Kontaktlinsen-Pflegeprodukten. Verwenden Sie **cleadow GP hydra one** nicht als Einsetz- oder Spüllösung für **Speziallinsen (Skleral- oder Orthokeratologie-Linsen)**.

SICHERHEITSHINWEISE

Lesen Sie diese Anweisungen bitte sorgfältig, bevor Sie **cleadow GP hydra one** benutzen und bewahren Sie sie zum Nachschlagen auf. Um Augeninfektionen zu verhindern, befolgen Sie bitte immer die Gebrauchsanweisungen. Beachten Sie diese Anweisungen mit besonderer Sorgfalt, wenn Sie **cleadow GP hydra one** mit **Speziallinsen (Skleral- oder Orthokeratologie-Linsen)**. Verwenden Sie die Lösung nicht erneut; entsorgen Sie nach jedem Gebrauch die im Linsenbehälter verbliebene **cleadow GP Hydra One**-Lösung. Kinder sollten **cleadow GP hydra one** nicht allein verwenden; Eltern werden gebeten, die tägliche Pflege zu übernehmen. Schützen Sie die Reste der Lösung 3 Monate nach dem Öffnen der Flasche weg. Flasche nach Gebrauch fest verschließen. Nicht für weiche Kontaktlinsen geeignet. Verschlucken Sie die Lösung nicht. Berühren Sie bitte nicht die Spitze der Flasche von **cleadow GP hydra one**, um Verunreinigungen zu vermeiden. **cleadow GP hydra one** ist nicht für Hitzedesinfektion geeignet. Benutzen Sie **cleadow GP hydra one** nicht nach Ablauf des Haltbarkeitsdatums. Verwenden Sie die Lösung nicht, wenn sie verfärbt ist. Benutzen Sie **cleadow GP hydra one** nicht, wenn das Sicherheitssiegel beschädigt ist oder fehlt.

INHALTSSTOFFE

cleadow GP hydra one
Polyhexamethylenbiguanid-Hydrochlorid (0,0005 %)
STERILE A
Wasserstoffperoxid als Konservierungsstoff (0,004 %)
Borsäure

ESPAÑOL | Instrucciones de uso


LEA DETENIDAMENTE Y CONSERVE ESTA INFORMACIÓN PARA FUTURAS CONSULTAS

Sistema de desinfección, limpieza y almacenamiento para lentes de contacto rígidas permeables al gas.

PARA TODAS LAS LENTES DE CONTACTO RÍGIDAS PERMEABLES AL GAS


Lávese bien las manos con jabón neutro antes de manipular sus lentes de contacto.

LIMPIEZA

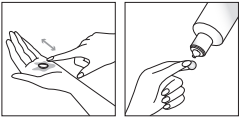

Retire cada lente de contacto de su ojo y colóquela en la palma de su mano. Coloque unas pocas gotas de **cleadow GP hydra one** en la superficie de cada lente de contacto y frótela de 20 a 30 veces con su dedo. Aclare cada lente de contacto a fondo durante 5 segundos con **cleadow GP hydra one**.

DESINFECCIÓN

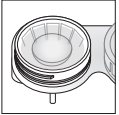

Llene el estuche de las lentes de contacto con **cleadow GP hydra one** y coloque las lentes de contacto en el estuche. Cierre el estuche con firmeza. Deje las lentes de contacto en remojo durante al menos 4 horas (o durante la noche) hasta que estén listas para usarse.

ENJUAGUE Y COLOCACIÓN DE LENTES CORNEALES

Antes de colocarlas, enjuague las lentes corneales GP durante 5 segundos con **cleadow GP hydra one**.

ENJUAGUE Y USO DE LENTES ESPECIALES (LENTES ESCLERALES U ORTOQUERATOLÓGICAS)

Para usuarios de lentes especiales (lentes esclerales o lentes de ortoqueratología (Ortho-K)), es necesario enjuagar bien las lentes durante unos 5 segundos con solución salina estéril o una solución de llenado de lentes adecuada antes de colocarlas en el ojo. No utilice **cleadow GP hydra one** como solución de inserción ni de enjuague para lentes esclerales u ortoqueratológicas. Utilice siempre solución salina estéril u otra solución de inserción recomendada específicamente por su profesional de la salud visual al insertar las lentes.

COMO LAVAR EL ESTUCHE PARA LENTES

Después del cuidado de la lente, limpie el estuche de las lentes con **cleadow GP hydra one** y deje que se seque al aire.

CONSERVACIÓN

Las lentes de contacto se pueden almacenar en el estuche no abierto durante un máximo de 30 días. Si las lentes de contacto se almacenan durante más tiempo, rellénelo con **cleadow GP hydra one** nuevo cada 30 días y antes de usar sus lentes de contacto.

ADVERTENCIAS

No utilice **cleadow GP hydra one** si es alérgico a cualquiera de sus ingredientes. Si experimenta cualquier molestia ocular persistente, lagrimeo excesivo, cambios en la visión o enrojecimiento de los ojos, quítese las lentes inmediatamente y consulte con su oftalmólogo o un especialista en el cuidado de los ojos. No utilice **cleadow GP hydra one** con ningún medicamento para los ojos u otros productos para el cuidado de las lentes de contacto. No utilice **cleadow GP hydra one** como solución de inserción ni de enjuague para **lentes especiales (lentes esclerales u ortoqueratológicas)**.

PRECAUCIONES

Lea atentamente este folleto de instrucciones antes de utilizar **cleadow GP hydra one** y guárdelo para futuras consultas. Para evitar infecciones en los ojos, siga siempre las instrucciones del usuario. Al utilizar **cleadow GP hydra one** con **LENTES ESPECIALES (LENTES ESCLERALES U ORTOQUERATOLÓGICAS)**, siga estas instrucciones con especial atención. No reutilice la solución; después de cada uso, deseché cualquier cantidad restante de solución **cleadow GP hydra one** del estuche de las lentes. Los niños no deben utilizar **cleadow GP hydra one** por sí mismos; solicítamos amablemente a los padres que se encarguen del cuidado diario de las lentes de sus hijos. Deseche la cantidad de solución que quede 3 meses después de abrir el bote. Cierre el bote firmemente después de cada uso. No utilice el producto con lentes de contacto blandas. No ingiera la solución. No toque la punta de **cleadow GP hydra one** para evitar la contaminación. No utilice **cleadow GP hydra one** para la desinfección mediante el calor. No utilice **cleadow GP hydra one** después de su fecha de caducidad. No utilice la solución si está descolorida.

INGREDIENTES

cleadow GP hydra one
Hidrocloruro de polihexametileno biguanida (0.0005 %)
STERILE A
Peroxido de hidrógeno como conservantes (0,004 %)
Ácido bórico

cleadow GP hydra one

ITALIANO | Istruzioni per l'uso


LEGGERE ATTENTAMENTE QUESTE INFORMAZIONI E CONSERVARLE PER RIFERIMENTO FUTURO

Sistema di disinfezione, pulizia e conservazione per lenti a contatto rigide gas permeabili.

PER TUTTE LE LENTI A CONTATTO RIGIDE GAS PERMEABILI.


Lavare bene le mani con sapone neutro prima di toccare le lenti.

PULIZIA

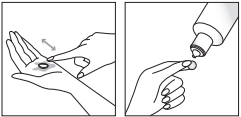

Rimuovere ciascuna lente dall'occhio e posizionarla sul palmo della mano. Mettere alcune gocce di soluzione **cleadow GP hydra one** sulla superficie di ciascuna lente e strofinare 20–30 volte con il dito. Risciacquare accuratamente ciascuna lente per 5 secondi con soluzione fresca **cleadow GP hydra one**.

DISINFEZIONE

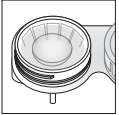

Riempire il portalenti con soluzione **cleadow GP hydra one** e posizionare le lenti nel portalenti. Chiudere con accuratezza il portalenti. Immergere le lenti per almeno 4 ore (o per una notte) fino a quando si è pronti per indossarle.

RISCIACQUO E INSERIMENTO DI LENTI CORNEALI

Risciacquare le lenti corneali GP per 5 secondi con **cleadow GP hydra one** prima di indossarle.

RISCIACQUO E APPLICAZIONE DI LENTI SPECIALI (LENTI SCLERALI O LENTI ORTOCHERATOLOGICHE)

Per chi utilizza lenti speciali (lenti sclerali o lenti ortocheratologiche/Ortho K): prima di applicare le lenti, è necessario sciacquarle accuratamente per circa 5 secondi con soluzione salina sterile o apposita soluzione di riempimento. Non utilizzare **cleadow GP hydra one** come soluzione di inserimento o di risciacquo per lenti sclerali o ortocheratologiche. Per l'inserimento delle lenti, utilizzare sempre soluzione salina sterile o altra soluzione di inserimento specifica consigliata dal proprio oculista.

LAVARE IL PORTALENTI

Dopo il trattamento della lente, risciacquare il portalenti con soluzione **cleadow GP hydra one** e lasciare asciugare all'aria.

CONSERVAZIONE

Le lenti possono essere conservate nel portalenti chiuso per un massimo di 30 giorni. Se le lenti vengono conservate più a lungo, sostituire la soluzione con **cleadow GP hydra one** fresca ogni 30 giorni e prima di indossare le lenti.

AVVERTENZE

Non utilizzare in caso di allergia a uno qualsiasi degli ingredienti utilizzati in **cleadow GP hydra one**. In caso di persistente fastidio oculare, lacrimazione eccessiva, alterazioni della visione o arrossamento oculare, rimuovere immediatamente le lenti e consultare il proprio oculista o uno specialista. Non utilizzare **cleadow GP hydra one** con farmaci oculari o altri prodotti per la cura delle lenti a contatto. Non utilizzare **cleadow GP hydra one** come soluzione per l'inserimento o il risciacquo delle lenti speciali (lenti sclerali o lenti ortocheratologiche).

PRECAUZIONI

Leggere attentamente questo foglietto illustrativo prima di utilizzare **cleadow GP hydra one** e conservarlo per riferimento futuro. Per evitare infezioni oculari, seguire sempre le istruzioni per l'uso. Seguire attentamente queste istruzioni quando si utilizza **cleadow GP hydra one** con **LENTI SPECIALI (LENTI SCLERALI O LENTI ORTOCHERATOLOGICHE)**. Non riutilizzare la soluzione; dopo ogni utilizzo, gettare via la soluzione **cleadow GP hydra one** presente nel contenitore delle lenti. I bambini non devono usare **cleadow GP hydra one** da soli; i genitori sono responsabili della loro cura quotidiana. Eliminare l'eventuale soluzione rimanente 3 mesi dopo l'apertura del flacone. Chiudere bene il flacone dopo l'uso. Non utilizzare il prodotto con lenti a contatto morbide. Non ingerire la soluzione. Non toccare la punta di **cleadow GP hydra one** per evitare la contaminazione. Non utilizzare **cleadow GP hydra one** per disinfettare a caldo. Non utilizzare **cleadow GP hydra one** dopo la data di scadenza. Non utilizzare la soluzione se è scolorita. Non utilizzare **cleadow GP hydra one** se il sigillo antimanomissione è danneggiato o assente.

INGREDIENTI

cleadow GP hydra one
Cloridrato di polissametilene biguanide (0,0005%)
STERILE A
Peroxido di idrogeno come conservanti (0,004%)
Acido borico

Ophtecs

● NEDERLANDS | Aanwijzingen voor gebruik


LEES DEZE INFORMATIE ZORGVULDIG DOOR EN BEWAAR DEZE VOOR TOEKOMSTIG GEBRUIK

Systeem voor het desinfecteren, reinigen en bewaren van harde contactlenzen die gas doorlaten.

VOOR ALLE HARDE CONTACTLENZEN DIE GAS DOORLATEN


Was uw handen zeer goed met een milde zeep alvorens uw lenzen aan te raken.

1 REINIGEN

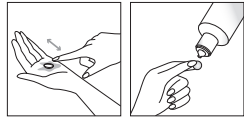

- Verwijder de contactlenzen uit uw ogen en plaats ze in uw handpalm. Doe een paar druppels **cleadew GP hydra one** op elk lensoppervlak en wrijf 20–30 keer met uw vinger. Spoel elke contactlens 5 seconden grondig met verse **cleadew GP hydra one**.

2 DESINFECTEREN

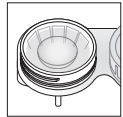

- Vul de lenshouder met **cleadew GP hydra one** en plaats de lenzen in de lenshouder. Sluit de lenshouder goed af. Laat de contactlenzen tenminste 4 uur (of gedurende de nacht) weken tot ze klaar zijn om te dragen.

3a SPOELEN EN DRAGEN VAN CORNEALE LENZEN

- Spoel corneale GP-lenzen gedurende 5 seconden met **cleadew GP hydra one** vóór het inzetten.

3b SPOELEN EN DRAGEN VAN SPECIALE LENZEN (SCLERALE LENZEN OF ORTHOKERATOLOGIELENZEN)

- Voor dragers van speciale lenzen (sclerale lenzen of orthokeratologie-/Ortho-K-lenzen) is het noodzakelijk de lenzen vóór het inzetten gedurende ongeveer 5 seconden grondig te spoelen met steriele zoutoplossing of een geschikte vuloplossing.
- Gebruik **cleadew GP hydra one** niet als vul- of spoeloplossing voor sclerale of Ortho-K-lenzen. Gebruik bij het inzetten van uw lenzen altijd steriele zoutoplossing of een andere vuloplossing die wordt aanbevolen door uw oogzorgspecialist.

4 REINIGEN VAN HET LENZENBAKJE

- Spoel, na het verzorgen van de contactlens, de lenshouder met **cleadew GP hydra one** en laat aan de lucht drogen.

BEWAREN

- Contactlenzen kunnen maximaal 30 dagen worden bewaard in de gesloten lenshouder. Als de contactlenzen langer worden bewaard, ververs dan de **cleadew GP hydra one** om de 30 dagen en voordat u uw contactlenzen draagt.

⚠ WAARSCHUWINGEN

- Gebruik **cleadew GP hydra one** niet indien u allergisch bent voor een van de in **cleadew GP hydra one** gebruikte bestanddelen.
- Haal de lenzen direct uit uw ogen en raadpleeg een oogarts of contactlensspecialist in geval van aanhoudende last van uw ogen, overmatige tranen, verandering in zicht of rode ogen.
- Gebruik **cleadew GP hydra one** niet in combinatie met oogmedicatie of andere verzorgingsproducten voor contactlenzen.
- Gebruik **cleadew GP hydra one** niet als inzet- of spoeloplossing voor **speciale lenzen (sclerale lenzen of orthokeratologielenzen)**.

⚠ VOORZORGSMATREGELEN

- Lees deze aanwijzingen goed door alvorens **cleadew GP hydra one** te gebruiken en bewaar referentie. Voorkom ooginfectie en volg derhalve altijd de aanwijzingen voor gebruik op.
- Volg deze instructies nauwkeurig op bij het gebruik van **cleadew GP hydra one** in combinatie met **SPECIALE LENZEN (SCLERALE LENZEN OF ORTHOKERATOLOGIELENZEN)**.
- Gebruik de oplossing niet opnieuw; gooi na elk gebruik eventuele resten van de **cleadew GP hydra one**-oplossing in de lenshouder weg.
- Kinderen mogen **cleadew GP hydra one** niet zelf gebruiken; een volwassene moet verantwoordelijk zijn voor de dagelijkse verzorging.
- Gooi resterende vloeistof 3 maanden na het openen van de fles weg.
- Sluit de fles na gebruik goed.
- Gebruik het product niet voor zachte contactlenzen.
- De vloeistof niet inslikken.
- Voorkom vervuiling en besmetting en raak de punt van **cleadew GP hydra one** niet aan.
- **cleadew GP hydra one** niet gebruiken voor hitte-desinfectie.
- Gebruik **cleadew GP hydra one** niet nadat de houdbaarheidsdatum is verstreken.
- De vloeistof niet gebruiken als deze verkleurd is.
- **cleadew GP hydra one** niet gebruiken indien het zegel is beschadigd of ontbreekt.
- Gebruik geen kraanwater voor het bewaren en spoelen van lenzen.
- Buiten bereik van kinderen houden.
- Bewaar producten op kamertemperatuur, vermijd daarbij blootstelling aan direct zonlicht.
- Om risico op bacteriële verontreiniging te voorkomen, de vloeistof niet overbrengen naar een andere houder, niet aanvullen met water of een andere medische vloeistof.
- **cleadew GP hydra one** niet gebruiken met een oud lenzenbakje.
- Gebruik altijd het nieuwe, bijgeleverde lenzenbakje.
- Raadpleeg een oogarts of contactlensoogzorgspecialist alvorens van verzorgingssysteem voor contactlenzen te wisselen.
- Boorzuur is schadelijk voor de voortplanting en kan bij inname door kinderen de toekomstige vruchtbaarheid verminderen of bij inname door zwangere vrouwen of vrouwen die borstvoeding geven. Ondanks dat dit product boorzuur bevat, is de concentratie dermate laag dat het geen gezondheidsrisico vormt. Daarom kan dit product veilig gebruikt worden door kinderen en zwangere vrouwen of vrouwen die borstvoeding geven zolang de instructies voor juist gebruik van het product worden opgevolgd. Gevoeligheid voor chemicaliën verschilt per persoon. Indien u gevoelig bent, raden we aan de lenzen te spoelen in een steriele saline-oplossing alvorens de lenzen te dragen.

BESTANDDELEN

cleadew GP hydra one
Polyhexamethyleenbiguanide hydrochloride (0,0005%)



Waterstofperoxide ter conservering (0,004%)
Boorzuur

● PORTUGUÊS | Instruções de utilização


LEIA ATENTAMENTE E GUARDE ESTA INFORMAÇÃO PARA CONSULTA FUTURA

Sistema de desinfecção, limpeza e armazenamento para lentes de contacto rígidas permeáveis ao gás (RPG).

PARA TODAS AS LENTES DE CONTACTO RÍGIDAS PERMEÁVEIS AO GÁS


Lave cuidadosamente as mãos com sabão neutro antes de manusear as suas lentes de contacto.

1 LIMPEZA

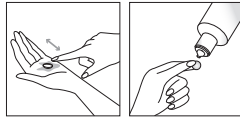

- Retire cada lente do olho e coloque-a na palma da mão. Deite algumas gotas de **cleadew GP hydra one** em cada superfície da lente e esfregue 20–30 vezes com o seu dedo. Enxague bem cada lente durante 5 segundos com o novo **cleadew GP hydra one**.

2 DESINFECÇÃO

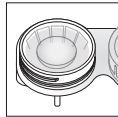

- Encha o estojo das lentes com **cleadew GP hydra one** e coloque as lentes em cada compartimento. Feche bem o estojo. Mergulhe as lentes durante pelo menos 4 horas (ou durante a noite) até estarem prontas a usar.

3a ENXAGUAR E UTILIZAR LENTES CORNEAIS

- Enxague as lentes GP corneais durante 5 segundos com **cleadew GP hydra one** antes de as utilizar.

3b ENXAGUAMENTO E UTILIZAÇÃO DE LENTES ESPECIAIS (LENTES ESCLERAIS OU LENTES DE ORTOQUERATOLOGIA)

- Para utilizadores de lentes especiais (lentes esclerais ou lentes de ortoqueratologia/Ortho-K), é necessário enxaguar bem as lentes durante aproximadamente 5 segundos, utilizando solução salina estéril ou uma solução de enchimento de lentes adequada antes de as colocar no olho.
- Não utilize **cleadew GP hydra one** como solução de inserção ou enxaguamento para lentes esclerais ou Ortho-K. Utilize sempre solução salina estéril ou outra solução de inserção especificamente recomendada pelo seu especialista em visão ao inserir as suas lentes.

4 LAVAR O ESTOJO

- Após os cuidados com as lentes, enxague o estojo com **cleadew GP hydra one** e deixe secar ao ar.

ARMAZENAMENTO

- As lentes podem ser armazenadas no estojo fechado por um máximo de 30 dias. Se as lentes forem guardadas por mais tempo, substitua por uma solução fresca de **cleadew GP hydra one** a cada 30 dias e antes de usar as suas lentes.

⚠ ADVERTÊNCIAS

- Não use **cleadew GP hydra one** se for alérgico a qualquer um dos ingredientes utilizados no mesmo.
- Caso sinta desconforto persistente nos olhos, lacrimejar excessivo, alterações de visão ou olhos vermelhos, retire imediatamente as lentes e consulte o seu médico oftalmologista, optometrista ou profissional da visão.
- Não use **cleadew GP hydra one** juntamente com qualquer medicação para os olhos ou outros produtos de cuidado das lentes de contacto.
- Não use **cleadew GP hydra one** como uma solução de inserção ou de enxaguamento para **lentes especiais (lentes esclerais ou de ortoqueratologia)**.

⚠ PRECAUÇÕES

- Leia atentamente esta folha de instruções antes de usar o **cleadew GP hydra one** e guarde-a para referência futura. Para evitar infeções oculares, siga sempre as instruções de utilização.
- Tenha um cuidado especial a seguir estas instruções quando utilizar **cleadew GP hydra one** com **LENTES ESPECIAIS (LENTES ESCLERAIS OU DE ORTOQUERATOLOGIAS)**.
- Não reutilize a solução; após cada utilização, elimine qualquer solução **cleadew GP hydra one** que permaneça no estojo das lentes.
- As crianças não devem usar **cleadew GP hydra one** sozinhas; os pais são responsáveis pelos seus cuidados diários.
- Deite fora qualquer solução restante 3 meses após a abertura do frasco.
- Feche bem o frasco após a utilização.
- Não utilize com lentes de contacto hidrofílicas.
- Não engula a solução.
- Não toque na ponta do frasco para evitar a contaminação.
- Não utilize o **cleadew GP hydra one** para desinfecção com recurso ao calor.
- Não utilize o **cleadew GP hydra one** após a data de validade.
- Não utilize a solução se estiver descolorida.
- Não utilize o **cleadew GP hydra one** se o selo estiver danificado ou ausente.
- Não utilize água da torneira para armazenar e enxaguar as lentes.
- Mantenha a solução fora do alcance das crianças.
- Armazene os produtos à temperatura ambiente, evitando a luz solar direta.
- Para prevenir a contaminação bacteriana, nem transfira a solução para outro recipiente, nem reabasteça com água ou com outro agente médico líquido.
- Não utilize o **cleadew GP hydra one** com um estojo de lentes antigo.
- Utilize sempre o novo estojo de lentes fornecido.
- Não mude o sistema de tratamento de lentes de contacto sem consultar um especialista em visão de cuidados oculares.
- O ácido bórico é tóxico para a reprodução e pode reduzir a fertilidade no futuro se ingerido por crianças ou prejudicar os bebés se ingerido por mulheres grávidas ou lactantes. Apesar de este produto também conter ácido bórico, a sua concentração não constitui um perigo para a saúde. O produto pode ser utilizado com segurança por crianças e mulheres grávidas ou à amamentar, desde que sejam seguidas as instruções de utilização. A sensibilidade aos produtos químicos varia de pessoa para pessoa. No caso de indivíduos sensíveis, recomenda-se a lavagem da lente com uma solução salina estéril antes da utilização.

INGREDIENTES

cleadew GP hydra one
Cloridrato de poli-hexametileno biguanida (0,0005%)



Peróxido de hidrogénio como conservante (0,004%)
Ácido bórico

● ΕΛΛΗΝΙΚΑ | Οδηγίες Χρήσης


ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Σύστημα απολύμανσης, καθαρισμού και αποθήκευσης για άκαμπτους αεριοδιαπερατούς φακούς επαφής.

ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΚΑΜΠΤΟΥΣ ΑΕΡΙΟΔΙΑΠΕΡΑΤΟΥΣ ΦΑΚΟΥΣ ΕΠΑΦΗΣ


Πλύνετε καλά τα χέρια σας με ήπιο σαπούνι πριν αγγίξετε τους φακούς επαφής σας.

1 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

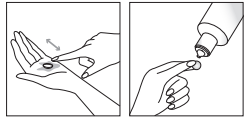

- Αφαιρέστε κάθε φακό από το μάτι σας και τοποθετήστε τον στην παλάμη σας. Ρίξτε μερικές σταγόνες **cleadew GP hydra one** στην επιφάνεια κάθε φακού και τρίψτε 20–30 φορές με το δάχτυλό σας. Ξεπλύνετε καλά κάθε φακό με το δευτερόλεπτα με καθαρό **cleadew GP hydra one**.

2 ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ

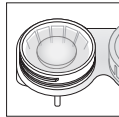

- Γεμίστε τη θήκη φακών με **cleadew GP hydra one** και τοποθετήστε τους φακούς στη θήκη φακών. Κλείστε καλά τη θήκη. Εμβάπτιστε τους φακούς για τουλάχιστον 4 ώρες (ή όλη τη νύχτα) μέχρι να τους ξαναφορέσετε.

3a ΞΕΒΓΑΛΜΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΕΡΑΤΟΕΙΔΙΚΩΝ ΦΑΚΩΝ ΕΠΑΦΗΣ

- Ξεπλύνετε τους κερατοειδικούς φακούς GP για 5 δευτερόλεπτα με **cleadew GP hydra one** πριν από την τοποθέτηση.

3b ΕΚΠΛΥΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΑΚΩΝ (ΕΚΛΗΡΟΕΙΔΕΙΣ ΦΑΚΟΙ Η ΦΑΚΟΙ ΟΡΘΟΚΕΡΑΤΟΛΟΓΙΑΣ)

- Για χρήστες ειδικών φακών (σκληροειδείς φακοί ή φακοί ορθοκερατολογίας/Ortho K), απαιτείται να ξεπλύνετε τους φακούς σας σχολαστικά για περίπου 5 δευτερόλεπτα χρησιμοποιώντας στείρο φυσιολογικό ορό ή κατάλληλο διάλυμα πλήρωσης φακών πριν τους τοποθετήσετε στο μάτι σας.
- Μην χρησιμοποιείτε το **cleadew GP hydra one** ως διάλυμα τοποθέτησης ή έκπλυσης για σκληροειδείς φακούς ή φακούς Ortho K. Χρησιμοποιείτε πάντα στείρο φυσιολογικό ορό ή άλλο διάλυμα τοποθέτησης που συστήνεται ειδικά από τον ειδικό φροντίδας των ματιών σας κατά την τοποθέτηση των φακών σας.

4 ΘΗΚΗ ΠΛΥΣΗΣ ΦΑΚΩΝ

- Μετά τη φροντίδα των φακών, ξεπλύνετε τη θήκη φακών με **cleadew GP hydra one** και αφήστε τη να στεγνώσει στον αέρα.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

- Οι φακοί μπορούν να αποθηκευτούν στην κλειστή θήκη φακών για μέγιστο διάστημα 30 ημερών. Εάν οι φακοί αποθηκευτούν για περισσότερο χρονικό διάστημα, αντικαταστήστε με καινούριο **cleadew GP hydra one** κάθε 30 ημέρες και πριν φορέσετε τους φακούς σας.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

- Μην χρησιμοποιείτε το **cleadew GP hydra one** εάν είστε αλλεργικοί σε οποιοδήποτε από τα συστατικά που χρησιμοποιούνται στο **cleadew GP hydra one**.
- Εάν αισθανθείτε επίμονη ενόχληση στα μάτια, υπερβολική δακρύρροια, αλλαγές στην όραση ή ερυθρότητα στους οφθαλμούς, αφαιρέστε αμέσως τους φακούς σας και συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρό σας ή έναν επαγγελματία οπτικό.
- Μην χρησιμοποιείτε το **cleadew GP hydra one** μαζί με οποιοδήποτε οφθαλμικό φάρμακο ή άλλα προϊόντα φροντίδας φακών επαφής.
- Μην χρησιμοποιείτε το **cleadew GP hydra one** ως διάλυμα τοποθέτησης ή ξεβγάλματος για **ειδικούς φακούς (σκληροειδείς φακοί ή φακοί ορθοκερατολογίας)**.

⚠ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

- Διαβάστε προσεκτικά αυτό το φύλλο οδηγιών πριν χρησιμοποιήσετε το **cleadew GP hydra one** και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. Για την αποφυγή οφθαλμικών λοιμώξεων, να ακολουθείτε πάντα τις οδηγίες χρήσης.
- Δώστε ιδιαίτερη προσοχή στην τήρηση αυτών των οδηγιών όταν χρησιμοποιείτε το **cleadew GP hydra one** με **ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΦΑΚΟΥΣ (ΣΚΛΗΡΟΕΙΔΕΙΣ ΦΑΚΟΙ Η ΦΑΚΟΙ ΟΡΘΟΚΕΡΑΤΟΛΟΓΙΑΣ)**.
- Μην επαναχρησιμοποιείτε το διάλυμα. Μετά από κάθε χρήση, απορρίψτε τυχόν διάλυμα **cleadew GP hydra one** που απομένει στη θήκη των φακών.
- Τα παιδιά δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούν μόνο τους το **cleadew GP hydra one**: οι γονείς παρακολουθούν να είναι υπεύθυνοι για την καθημερινή τους φροντίδα.
- Απορρίψτε τυχόν εναπομείναν διάλυμα 3 μήνες μετά το άνοιγμα της φιάλης.
- Κλείστε καλά τη φιάλη μετά τη χρήση.
- Να μη χρησιμοποιείται για μαλακούς φακούς επαφής.
- Μην καταπίνετε το διάλυμα.
- Μην αγγίξετε το ρύγχος του **cleadew GP hydra one** για να αποφύγετε τη μόλυνση.
- Μην χρησιμοποιείτε το **cleadew GP hydra one** για θερμική απολύμανση.
- Μην χρησιμοποιείτε το **cleadew GP hydra one** μετά την ημερομηνία λήξης.
- Μην χρησιμοποιείτε το διάλυμα εάν είναι αποχρωματισμένο.
- Μην χρησιμοποιείτε το **cleadew GP hydra one** εάν η σφραγίδα ασφαλείας έχει υποστεί φθορά ή λείπει.
- Μην χρησιμοποιείτε νερό της βρύσης για την αποθήκευση και την πλύση των φακών.
- Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά.
- Αποθηκεύστε τα προϊόντα σε θερμοκρασία δωματίου, αποφεύγοντας το άμεσο ηλιακό φως.
- Για την αποφυγή βακτηριακής μόλυνσης, μην μεταφέρετε το διάλυμα σε άλλο δοχείο και μην το αναπληρώνετε με νερό ή άλλο υγρό μετά για ιατρική χρήση.
- Μην χρησιμοποιείτε το **cleadew GP hydra one** με πολύ θήκη φακών.
- Χρησιμοποιείτε πάντα την καινούρια θήκη φακών που παρέχεται.
- Μην αλλάζετε το σύστημα φροντίδας φακών επαφής χωρίς να συμβουλευτείτε ειδικός επαγγελματία.
- Το βορικό οξύ είναι τοξικό για την αναπαραγωγική και μπορεί να μειώσει τη μελλοντική γονιμότητα εάν καταποθεί από παιδιά ή να βλάψει τα μωρά εάν ληφθεί από έγκυες ή θηλάζουσες γυναίκες. Παρότι το παρόν προϊόν περιέχει βορικό οξύ, η ποσότητα βορικού οξέος στο προϊόν είναι σε τέτοια συγκέντρωση που δεν αποτελεί κίνδυνο για την υγεία. Το παρόν προϊόν είναι ασφαλέας για χρήση από παιδιά και έγκυες ή θηλάζουσες γυναίκες εάν τηρηθούν οι οδηγίες του προϊόντος. Η ευαισθησία στα χημικά διαφέρει από άτομο σε άτομο. Για άτομα με ευαισθησία, η σύσταση είναι να ξεπλύνετε τον φακό με διάλυμα στείρου φυσιολογικού ορού πριν τον φορέσετε.

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

cleadew GP hydra one
Υδροχλωρική Πολύ (εξαμεθυλενο) διουανιδή (0,0005%)



Υπεροξείδιο του Υδρογόνου ως συντηρητικό (0,004%)
Βορικό οξύ

● TÜRKÇE | Kullanım Talimatları


LÜTFEN DİKKATLİCE OKUYUN VE BU BİLGİLERİ GELECEKTE KULLANMAK ÜZERE SAKLAYIN

Sert gaz geçirgen kontakt lensler için dezenfeksiyon, temizlik ve saklama sistemidir.

TÜM SERT GAZ GEÇİRGEN KONTAKT LENSLER İÇİNDİR


Kontakt lenslerinizi tutmadan önce ellerinizi yumuşak sabunla iyice yıkayınız.

1 TEMİZLEME

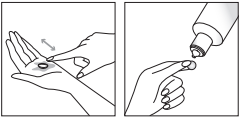

- Her bir lensi gözünüzden çıkarınız ve avucunuza yerleştiriniz. Her bir lens yüzeyine birkaç damla **cleadew GP hydra one** damlatınız ve parmağınızla 20–30 kez ovalayınız. Her bir lensi yeni **cleadew GP hydra one** ile 5 saniye boyunca iyice durulayınız.

2 DEZENFEKSİYON

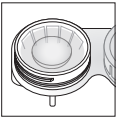

- Lens kapını **cleadew GP hydra one** ile doldurun ve lensleri lens kabına yerleştiriniz ve lens kabını sıkıca kapatınız. Takmaya hazır olana kadar lensleri en az 4 saat (veya bir gece) bekletiniz.

3a KORNEA LENSLERİNİN DURULANMASI VE TAKILMASI

- Kornea GP lenslerini takmadan önce 5 saniye boyunca **cleadew GP hydra one** ile durulayın.

3b ÖZEL LENSLERİN DURULANMASI VE TAKILMASI (SKLERAL LENSLERİN VEYA ORTOKERATOLOJİ LENSLERİNİN)

- Özel lens (skleral lensler veya ortokeratoloji/Orto K lensleri) kullanıcıları için, lensleri göze takmadan önce steril salin veya uygun bir lens dolum çözülüsünü kullanarak yaklaşık 5 saniye boyunca iyice durulamanız gerekir.
- Skleral veya Orto K lensleri için takma veya durulama çözülüsünü olarak **cleadew GP hydra one** kullanmayın. Lenslerinizi takarken her zaman steril salin veya göz doktorunuz tarafından özellikle önerilen başka bir takma çözülüsünü kullanın.

4 LENS KABINI YIKAMA

- Lens bakımından sonra, lens kabını **cleadew GP hydra one** ile durulayın ve kurumaya bırakınız.

SAKLAMA

- Lensler açılmamış lens kabında en fazla 30 gün saklanabilir. Lensler daha uzun süre saklanırsa, her 30 günde bir ve lenslerinizi takmadan önce yeni **cleadew GP hydra one** ile değiştiriniz.

⚠ İKAZLAR

- **cleadew GP hydra one**'de kullanılan bileşenlerden herhangi birine alerjiniz varsa **cleadew GP hydra one** kullanmayınız.
- Sürekli göz rahatsızlığı, aşırı yaşarma, görme değişiklikleri veya gözde kızarıklık oluşursa, lenslerinizi derhal çıkarınız ve göz doktorunuza veya bir göz bakım pratisyenine danışınız.
- **cleadew GP hydra one**'yi herhangi bir göz ilacı veya diğer kontakt lens bakım ürünleriyle birlikte kullanmayınız.
- **cleadew GP hydra one**'i özel lensler (skleral veya ortokeratoloji lensleri) için yerleştirme veya durulama çözülüsünü olarak kullanmayın.

⚠ UYARILAR

- **cleadew GP hydra one**'yi kullanmadan önce bu talimat sayfasını dikkatlice okuyun ve ileride başvurmak üzere saklayınız. Göz enfeksiyonlarını önlemek için her zaman kullanıcı talimatlarına uyunuz.
- **cleadew GP hydra one**'i **ÖZEL LENSLER (SKLERAL VEYA ORTOKERATOLOJİ LENSLERİ)** ile kullanırken bu talimatlara uymaya özellikle dikkat edin.
- Solüsyonu tekrar kullanmayın; her kullanımdan sonra lens kabında kalan **cleadew GP hydra one** solüsyonunu atın.
- Çocuklar **cleadew GP hydra one**'yi kendi başlarına kullanmamalıdır; ebeveynlerin günlük bakımlarından sorumlu olmaları istenmektedir.
- Şişeyi ağıttıktan 3 ay sonra kalan solüsyonunu atınız.
- Kullandıktan sonra şişeyi sıkıca kapatınız.
- Yumuşak kontakt lensler için kullanmayınız.
- Solüsyonunu yutmayınız.
- Kirletmeyi önlemek için **cleadew GP hydra one**'nin ucuna dokunmayınız.
- **cleadew GP hydra one**'yi ısı dezenfeksiyonu için kullanmayınız.
- Son kullanma tarihinden sonra **cleadew GP hydra one** ile kullanmayınız.
- Renği değişmişse solüsyonu kullanmayınız.
- Koruma etiketi hasarlı veya yoksa **cleadew GP hydra one**'yi kullanmayınız.
- Lensleri saklamak ve durulamak için musluk önce bu talimat sayfasını dikkatlice okuyun ve ileride başvurmak üzere saklayınız. Göz enfeksiyonlarını önlemek için her zaman kullanıcı talimatlarına uyunuz.
- Çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayınız.
- Ürünleri doğrudan güneş ışığından koruyarak oda sıcaklığında kuru bir yerde saklayınız.
- Bakteriyel kontaminasyonu önlemek için solüsyonu başka bir kaba aktarmayınız, su veya başka bir sıvı tıbbi madde ile doldurmayınız.
- **cleadew GP hydra one**'yi eski bir lens kabı ile kullanmayınız.
- Her zaman yeni verilen lens kabını kullanınız.
- Göz bakım uzmanına danışmadan kontakt lens bakım sisteminizi göz doktoru.
- Borik asit üremeye karşı toksiktir ve çocuklar tarafından içilirse gelecekteki doğurganlığı azaltabilir veya hamile veya emziren kadınlar tarafından içilirse bebeklere zarar verebilir. Bu ürün de borik asit içermesine rağmen, bu üründeki borik asit miktarı sağlık açısından tehlike oluşturmayacak bir yoğunluktadır. Bu ürün, ürün talimatlarına uyulduğu sürece çocuklar ve hamile veya emziren kadınlar tarafından güvenle kullanılabilir. Kimyasallara karşı hassasiyet kişiden kişiye farklılık gösterir. Hassas kişilerin lensi takmadan önce steril salin solüsyonuyla durulamaları tavsiye edilir.

BİLEŞENLER

cleadew GP hydra one
Polihexametilen biguanid hidroklorür (%0,0005)



Koruyucu olarak Hidrojen peroksit (%0,004)
Borik asit

cleadew
GP hydra one

Any serious incident that has occurred in relation to the device should be reported to the manufacturer and the competent authority of the Member State of the EU.

OPHTECS Europe B.V.
Marithaime 20, 6662 WD Elst, The Netherlands
+31 (0)263 54 44 44
info@ophtecs-europe.com

MADE IN JAPAN

MD 2797

OPHTECS Europe B.V.
Marithaime 20, 6662 WD Elst, The Netherlands

OPHTECS CORPORATION
5-2-4 Minatojima Minamimachi, Chuo-ku, Kobe, 650-0047 Japan

www.ophtecs.com

ISSUE DATE: 20221121
REVISE DATE: 20260601
3-2607001